


# BIOLUX<sub>PRO</sub> DENT



## Gingivitis (Inflamación de las Encías)

1. Conecta tu dispositivo DENT a tu teléfono o bien a una batería portátil.
2. Coloca en tu boca con el tope hacia arriba.
3. Utilízalo por 5 minutos tres veces al día después de cada cepillado dental.
4. Al terminar el tiempo indicado, desconecta y retira de tu boca.
5. Lava tu dispositivo con agua simple y jabón o pasta de dientes, sin mojar la conexión que se indica con una flecha en este protocolo.

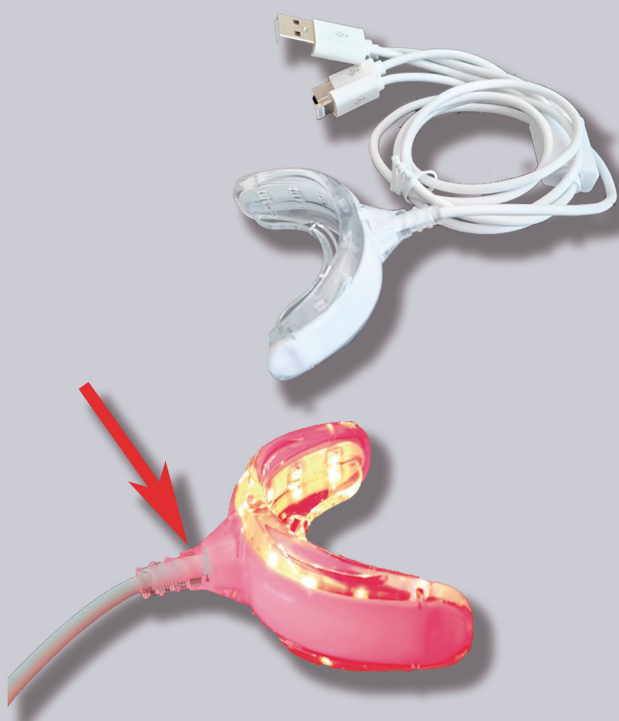

Hidratarse correctamente mejora los resultados  
Est sugiere ni sustituye ningún tratamiento médico

