


BIOLUX_{PRO} DENT



Post ajuste de Brackets

1. Conecta tu dispositivo DENT a tu teléfono o bien a una batería portátil.
2. Coloca en tu boca con el tope hacia arriba.
3. Utilízalo por 5 minutos, tres veces al día.
4. Repite por 48 horas posteriores al ajuste de tus brackets.
5. Al terminar el tiempo indicado, desconecta y retira de tu boca.
6. Lava tu dispositivo sin mojar la conexión que se indica con una flecha en este protocolo.

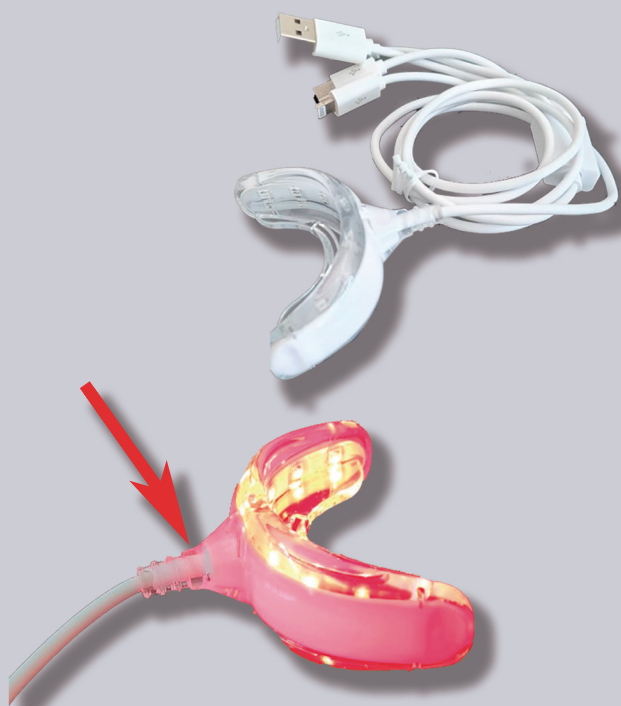

Hidratarse correctamente mejora los resultados
Esto no sugiere ni sustituye ningún tratamiento médico

