


# BIOLUX<sub>PRO</sub> DENT



## Post Tratamiento Dental

1. Conecta tu dispositivo DENT a tu teléfono o bien a una batería portátil.
2. Coloca en tu boca con el tope hacia arriba.
3. Utilízalo por 10 minutos una vez al día.
4. Repite por las siguientes 48 hrs.
5. Al terminar el tiempo indicado, desconecta y retira de tu boca.
6. Lava tu dispositivo con agua simple y jabón o pasta de dientes, sin mojar la conexión que se indica con una flecha en este protocolo.

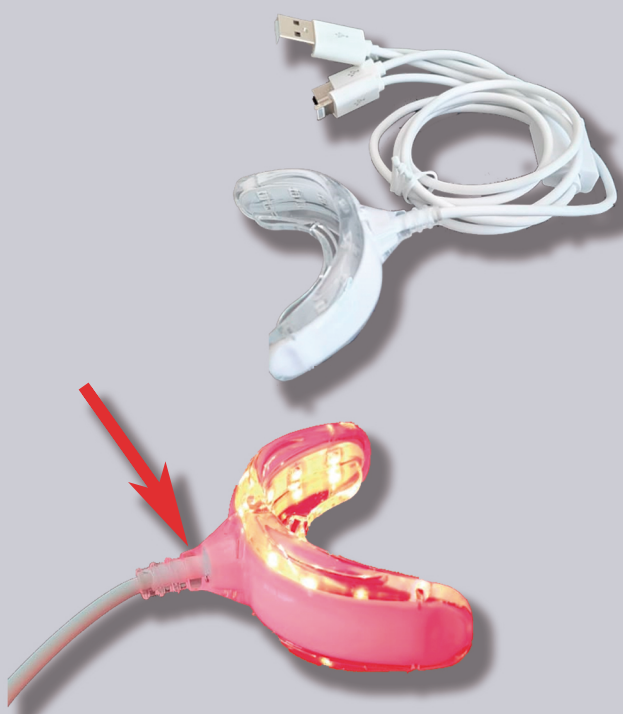

Hidratarse correctamente mejora los resultados  
Esto no sugiere ni sustituye ningún tratamiento médico

