





BIOLUX^{PRO}

LENS

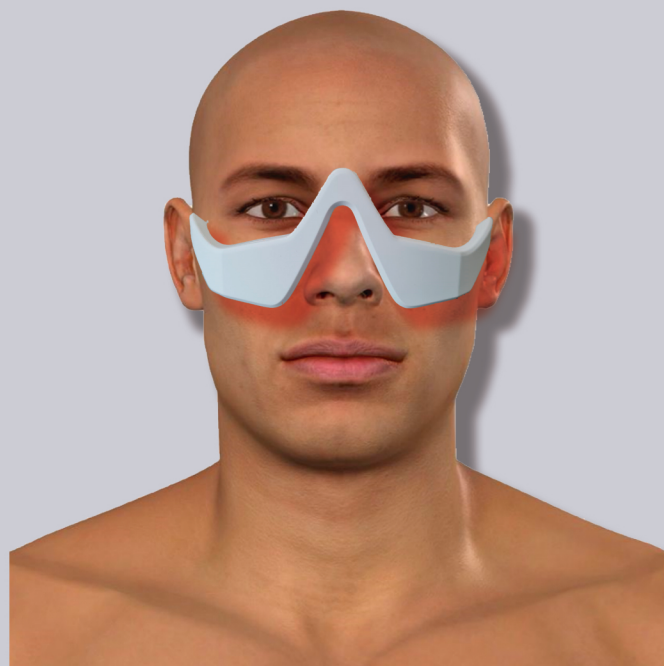

Vista Cansada

1. Limpia bien tu cara, debe estar libre de cremas, bloqueadores, maquillaje y polvo. Deja un poco húmeda la zona de los pómulos.
2. Presiona /Mode tres segundos para encenderlos.
3. Presiona  hasta encender los tres focos.
4. Coloca los lentes por debajo de tus ojos, que toquen tu piel; recuerda que tienes húmeda la zona.
5. Deja actuar por 5 minutos, utilizar 3 veces al día.
6. Apaga los lentes presionando /Mode
7. Puede haber un leve enrojecimiento de la zona por unos minutos.



Hidratarse correctamente mejora los resultados
Esto no sugiere ni sustituye ningún tratamiento médico

